

BIOMÉRIEUX

# VIDAS<sup>®</sup> KUBE<sup>™</sup>

Entre en un mundo de simplicidad

CONFIABLE. ROBUSTO. UNIVERSAL.



PIONEERING DIAGNOSTICS

# VIDAS® KUBE™

## SU SOLUCIÓN DE INMUNOENSAYOS

Las necesidades de inmunoensayos en su laboratorio evolucionan. Usted debe proporcionar resultados precisos, el mismo día y de manera oportuna para garantizar que la satisfacción del paciente y del médico siga siendo alta.

**Entre al mundo de la simplicidad con VIDAS® KUBE™**, una plataforma verdaderamente flexible, costo-eficiente y automatizada que proporciona resultados rápidos con total confianza.

¡Fácilmente escalable, VIDAS® KUBE™ es una adición simple y confiable para un laboratorio en evolución!

PANTALLA TÁCTIL Full HD



### IMPLEMENTACIÓN SIMPLE

**Añadir VIDAS® KUBE™ a su laboratorio es simple, benefíciense de:**

- Flexibilidad de volumen accesible: hasta 36 pruebas/hora por módulo
- Diseño de sobremesa apilable: 1-6 módulos
- Requiere entrenamiento e instalación mínimos
- Ordenador integrado hasta para 2 módulos

### MAYOR CONFIANZA EN LOS RESULTADOS

**Asegure siempre resultados confiables y precisos con VIDAS® KUBE™.**

- Verificación de compatibilidad de tiras y conos a bordo
- Detección óptica de la muestra
- Alertas en caso de problemas con la muestra (fugas/obstrucciones)
- Calibración compartida entre módulos

**VIDAS® KUBE™ facilita la adopción por parte del usuario a través de:**

- Interfaz de software intuitiva y fácil de usar
- Conectividad LIS<sup>2</sup> bidireccional
- Datos seguros con protección de ciberseguridad
- Trazabilidad completa (21CFR<sup>3</sup>, seguimiento de auditoría)

<sup>1</sup> Control de Calidad VIDAS®

<sup>2</sup> Sistema de información de laboratorio (LIS)

<sup>3</sup> Código de Regulaciones Federales

DOS SECCIONES  
INDEPENDIENTES  
DE 6 PRUEBAS C/U

LED DEL  
INSTRUMENTO



BOTÓN: ENCENDIDO/APAGADO

LUZ DE ESTADO DE  
FUNCIONAMIENTO DE  
LA SECCIÓN

## RECONOCIDO SERVICIO DE ALTA CALIDAD

**VIDAS® KUBE™ le ofrece tranquilidad  
a largo plazo con:**

- Ruta de entrenamiento evolutiva y adaptable
- Productividad optimizada con mantenimiento remoto a través de conectividad VILINK®
- Mantenimiento y controles reducidos (sin necesidad de QCV®1)

La automatización  
adaptable de VIDAS®  
KUBE™ ayudará a que  
su laboratorio sea más  
productivo, más preciso  
y más innovador; todo  
en una plataforma  
simplificada.



# CONCEPTO VIDAS® POR DENTRO

## CONCEPTO ÚNICO DE PRUEBA INDIVIDUAL

- Reactivos listos para usar con una larga vida útil
- Todo incluido dentro del kit.



## AMPLIO MENÚ DE PRUEBAS DE RUTINA CON MÁS DE 80 ENSAYOS

- Desempeño demostrado en estudios analíticos\*
- Las soluciones de ensayo VIDAS® cubren:
  - Urgencias y Cuidado Crítico
  - Inmunoquímica
  - Enfermedades Infecciosas



\*Consulte a su representante local para obtener más información.

# EL MUNDO VIDAS®


Comprendemos la **evolución de las necesidades de su laboratorio**, tanto si es nuevo en automatización, como si se está actualizando a una tecnología avanzada.

Reconocemos su necesidad de tener **soluciones simples y duraderas** con un excelente servicio para mantener su laboratorio en funcionamiento.

Hemos diseñado VIDAS® KUBE™ para que pueda **beneficiarse de tecnología avanzada**, manteniendo todo lo que los laboratorios aprecian de la reconocida solución VIDAS®.

Al asociarse con bioMérieux, obtiene **más de 30 años** de experiencia mundial en inmunoensayos.

## MÁS DE 3 DÉCADAS DE INNOVACIÓN

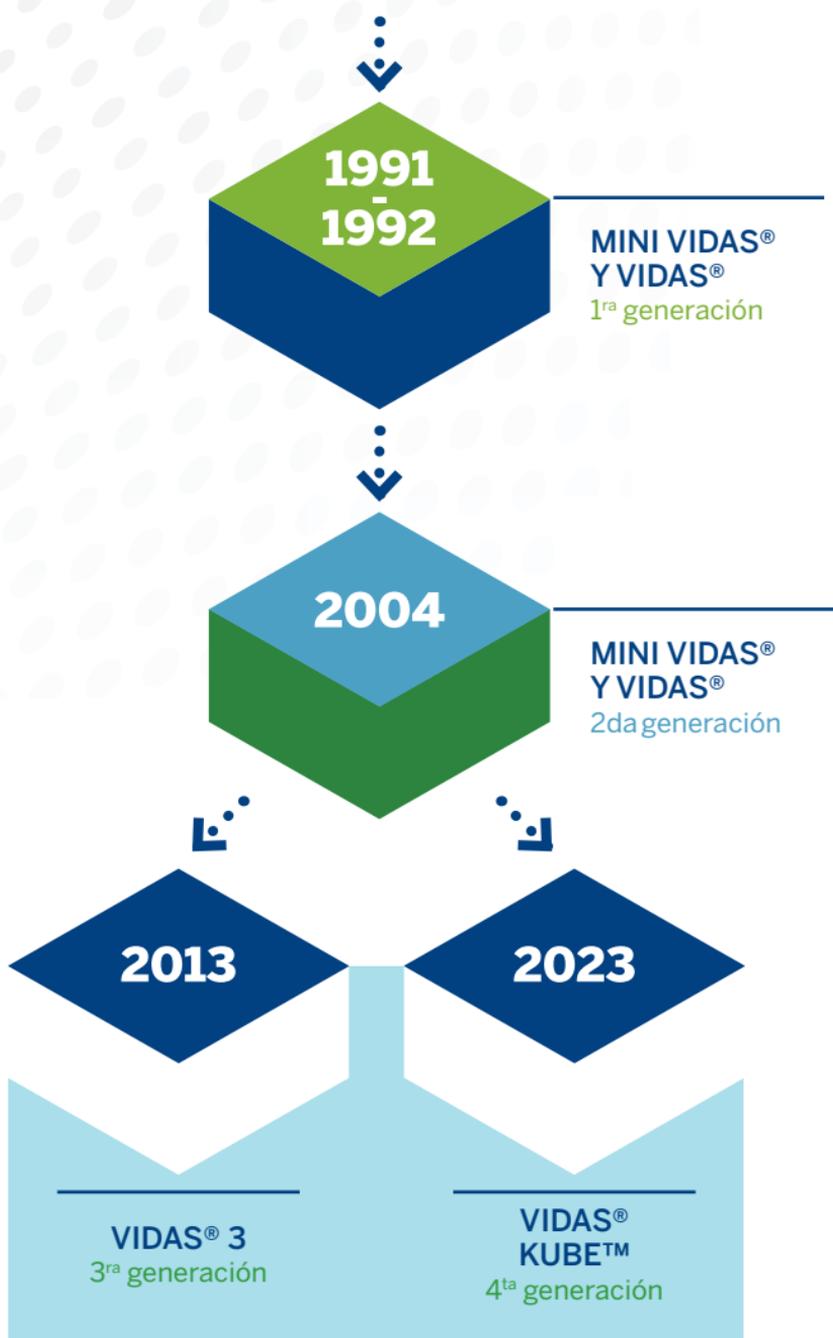



## ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO

<b>Referencias VIDAS® KUBE™</b>	423 912 (unidad sencilla) 470 7576 (configuración estándar)
<b>Peso</b>	23.7 kg (unidad sencilla)
<b>Dimensiones</b>	L. 43.4 cm x H 32.1 cm x P 48.5 cm (unidad sencilla)
<b>Electricidad</b>	100/240 V, 56-60Hz
<b>Potencia</b>	150 W
<b>Eficiencia energética</b>	Modo suspendido; inicio matutino programable
<b>Temperatura de operación</b>	18-30°C
<b>Humedad de operación</b>	20-80% humedad relativa sin condensación
<b>Altitud máxima</b>	2700 m
<b>Nivel de sonido en modo operativo</b>	≤ 70 dBa
<b>Criterios de usabilidad</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Purga de datos: archivado automático de datos</li><li>• Seguridad del usuario durante las pruebas: autobloqueo de puertas seccionales</li><li>• Ajuste de calibración: modificable</li></ul>

## Especificaciones del PC

Se requiere un PC adicional para la configuración de VIDAS® KUBE™ desde 3 a 6 módulos.

<b>Configuración SO</b>	Windows 10
<b>CPU</b>	Intel Core i3 – 8100 3.6 GHz
<b>Memoria</b>	27000 resultados de pruebas Aprox. 5 años de datos
<b>RAM</b>	DDR4 - 16GB 2400 MHz
<b>Conectores</b>	Puerto USB x 6 Puerto Ethernet x 1 Puerto visualización (pantalla) x 1